

# FICHA TÉCNICA

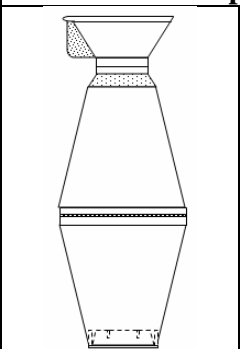
<b>Nombre:</b>	<b>INHALOCAMARA</b> (Cámara Espaciadora)
<b>Referencia:</b>	107905 Adulto 107910 Pediátrica 107915 Neonato
<b>Fabricante:</b>	BIOPLAST S.A.
<b>Marca:</b>	BIOLIFE
<b>Vida Útil:</b>	Desechable no Perecedero
<b>Procedencia:</b>	Colombia
<b>Registro Sanitario:</b>	2009DM-0003863
<b>Vigencia:</b>	Mayo 18 de 2019

## Descripción General del Producto

Inhalocámara (Cámara espaciadora) desmontable para facilitar su limpieza, máscara ergonómica, suave y flexible, adaptable a la cara del paciente, diseñada exclusivamente para la anatomía del adulto, niño y recién nacido. Para uso de un solo paciente. Válvula de flujo (Opcional). Debido a la temperatura de plastificación (Proceso productivo 160° centígrados) garantiza la asepsia y libera el producto de presencia de patógenos.

## Uso y/o Funcionalidad

Es un dispositivo diseñado para la óptima dosificación de medicamentos en aerosol (mediante inhalación). Su propósito es mejorar la coordinación y disminuir la cantidad de partículas grandes que se pueden acumular en la cavidad bucal y en la garganta, al tiempo que permite el paso de las partículas terapéuticas más pequeñas, lo anterior elimina la necesidad de coordinar el movimiento de inhalación y la administración del medicamento. La inhalocámara permite disminuir la presión de impacto del inhalador en la cavidad bucal y faríngea, facilitando la dispersión de partículas del tamaño óptimo para ser inhaladas.

Componentes		
	N	PIEZA
	1	Recipiente (parte 1)
	2	Recipiente (parte 2)
	3	Máscara
	4	Válvula de Flujo (Opcional)

MATERIALES	
Tipo	Características
RECIPIENTE Y VALVULA DE FLUJO - Polipropileno Clarificado	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alto grado de transparencia</li> <li>▪ Resistencia mecánica</li> <li>▪ Alto grado de tenacidad</li> <li>▪ Fácil mantenimiento y aseo</li> </ul>
MASCARA - PVC cristal grado médico	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flexible.</li> <li>▪ Alto grado de Suavidad.</li> <li>▪ Atoxico</li> <li>▪ Atraumatica</li> </ul>

PRESENTACION		
Tipo	Material	Unidad
Etiqueta	Material de papel impreso mediante sistema Offset, contiene descripción y especificaciones generales del producto información técnica y datos del fabricante, código de Barras	Individual
Envase	Bolsa de Polietileno de baja densidad o caja plegadiza impresa	Individual
Empaque	Caja de cartón corrugado, contiene especificaciones del producto y del fabricante.	65 Unidades

**Contraindicaciones:** Ninguna Conocida

### Advertencias y precauciones de empleo

- Uso bajo supervisión de un profesional del área medica.
- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Uso de un solo paciente.
- **Modo De Empleo:**
  - Agite el inhalador
  - Ajuste la boquilla
  - Dispare la dosis
  - Inhale lenta y profundamente

- Retenga la inhalación
- Repita el procedimiento hasta agotar el medicamento
- Limpieza: Desarmable en tres partes para facilitar su limpieza, lávela en una solución de agua jabonosa diluida en vinagre. Después de efectuada su limpieza, se debe secar muy bien cada una de las partes, antes de armarla nuevamente.
- Al momento de desechar, realizar la limpieza del dispositivo de la misma forma que se enuncia en el punto anterior.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>
--	----------------------